



KEELER GRIFF FÜR TASCHENFORMAT

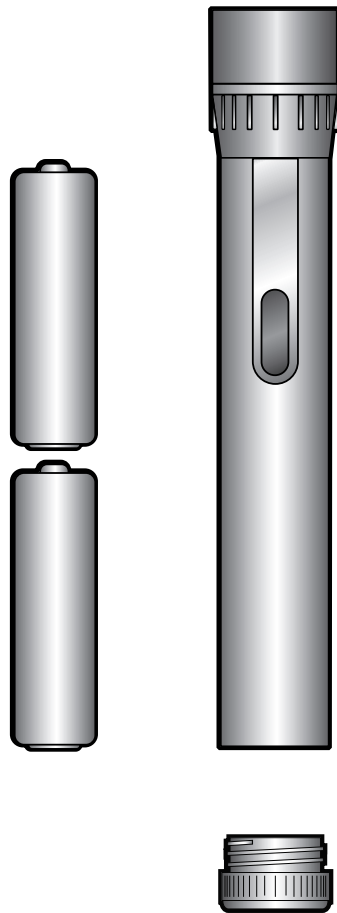


**LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND
FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN**

 **Keeler**

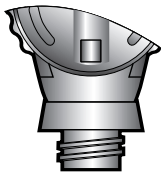

Anschluss der Instrumentenköpfe an den Griff.

Das Verbindungsstück zwischen dem Instrumentenkopf und dem Griff besteht aus einem Schraubgewinde. Um den Instrumentenkopf anzuschließen, verbinden Sie ihn wie angegeben und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass die Verbindung zwischen dem Kopf und dem Griff fest ist.

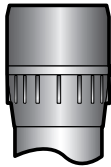

Eignung

Die Keeler Fachmann-, professionellen, Standard- und Arzt-Ophthalmoskope und die Keeler Skiaskope sind für den Einsatz mit Keeler Vista 2.8V und 3.6V Keeler Griffen geeignet.



AUS

EIN

Ein/Aus-Helligkeitsregler

Um das Instrument einzuschalten, drehen Sie den Helligkeitsregler wie angezeigt nach rechts. Um das Instrument auszuschalten, drehen Sie den Helligkeitsregler wie angezeigt nach links.

Batterien einlegen/wechseln

Kappe des Batteriefachs losschrauben, Batterien einlegen und Kappe des Batteriefachs wie angezeigt wieder einsetzen. Es sollten folgende Trockenbatterien verwendet werden:

Keeler Griff für Taschenformat - 2 x 1.5V Größe AA Trockenbatterien - Duracell MN 1500 oder gleichwertig.

Reinigungsanleitungen

Das Instrument sollte nur per Hand, und ohne es in Flüssigkeiten einzutauchen, wie im Folgenden beschrieben gereinigt werden:

1. Die Außenfläche mit einem sauberen, saugfähigen und fusselfreiem Tuch, das mit Wasser/Reinigungslösung (2% Reinigungsmittel des Gesamtvolumens) oder Wasser/Isopropyl-Alkohollösung (70% Isopropyl-Alkohol des Gesamtvolumens) angefeuchtet wurde, abwischen.
2. Darauf achten, dass überfließende Lösung nicht ins Instrument gelangt. Vorsichtig vorgehen, um sicherzustellen, dass das Tuch keine Lösung aufsaugt.
3. Oberflächen sollten vorsichtig per Hand mit einem sauberen, fusselfreien, trockenen Tuch getrocknet werden.
4. Gebrauchte Reinigungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.

Garantie und Wartung

Es sind keine vom Benutzer zu wartende Teile vorhanden. Jegliche vorbeugende Wartung und Instandhaltung ist ausschließlich von dazu befugten Keeler Vertretern auszuführen.

Ihr Keeler Griff hat eine Garantie für 3 Jahre, und wird in folgenden Fällen ersetzt bzw. gebührenfrei repariert:

1. Fehler aufgrund mangelhafter Herstellung.
2. Ein Nachweis über den Kauf liegt einer jeden Reklamation bei.

HERGESTELLT IN GROSSBRITANNIEN VON:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

England

Tel.: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 827145

Gebührenfreie Nummer: 0800 521 251

VERTRIEB:

Keeler Instruments Inc.

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Gebührenfrei: 1 800 523 5620

Tel.: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

„Das CE-Zeichen auf diesem
Produkt zeigt, dass es lt. ☐
Bestimmungen der ☐
Medizingeräte-Richtlinie ☐
93/42/EWG geprüft wurde ☐
und hiermit konform geht.“



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Lieferant